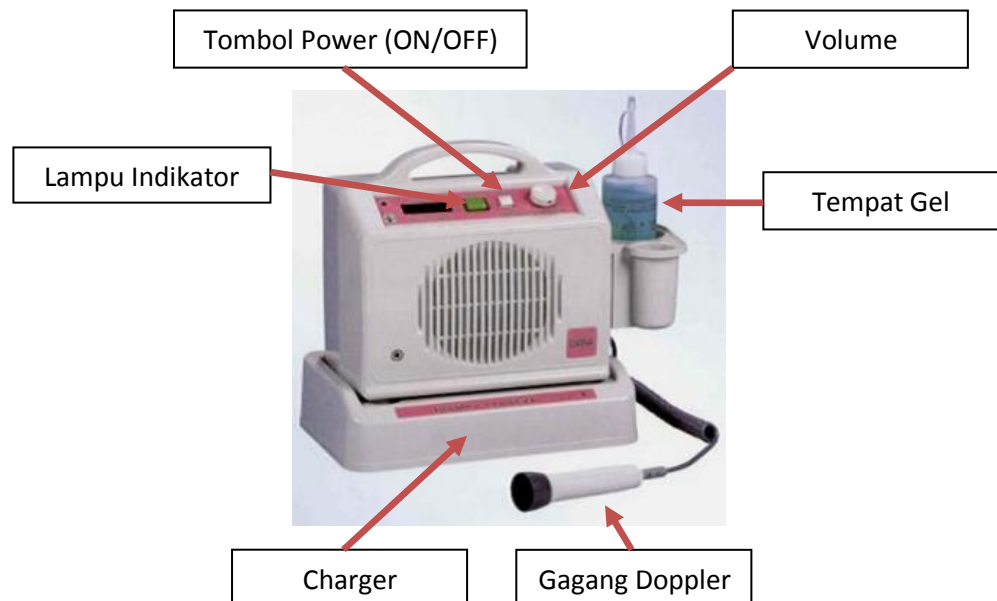

	INSTRUKSI KERJA				Diperiksa	Disahkan
					(Ahmad Sugeng P., S.Kp.) Ka Sub Unit Lab	(Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.) Sekjur
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman		
Kode Distribusi		0		1 dari 1		

CARA PENGGUNAAN DOPPLER FETUS DETECTOR

INSTRUKSI KERJA :

1. Letakkan doppler pada tempat yang datar.
2. Ambil gagang dopler dari tempatnya.
3. Tekan tombol power untuk menghidupkan sampai lampu indikator menyala.
4. Beri gel pada permukaan gagang dan perut ibu hamil pada posisi sampai terdengar suara denyut jantung janin yang paling jernih dan keras.
5. Jangan tekan perut ibu hamil terlalu keras, jangan membuat suara gaduh.
6. Atur volume doppler sesuai kebutuhan.
7. Setelah selesai, bersihkan gel dengan tissue.
8. Matikan doppler dengan menekan tombol power.
9. Letakkan gagang pada tempatnya.



	<h1 style="text-align: center;">INSTRUKSI KERJA</h1>				Diperiksa	Disahkan
					(Ahmad Sugeng P., S.Kp.)	(Joni Siswanto, S.Kep., M.Kes.)
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman	Ka Sub Unit Lab	Sekjur
Kode Distribusi		0		1 dari 2		

CARA PENGGUNAAN AUSCULTATION TRAINER AND SMARTSCOPE™

INSTRUKSI KERJA :

a. Pengisian baterai (*charger*):

- 1) Jika baterai doppler lemah/habis maka perlu isi ulang dengan cara sambungkan adaptor dengan doppler.
- 2) Hubungkan listrik ke 220 V hingga lampu indikator menyala, isi selama 8 jam.

Untuk pertama kali pengisian berlangsung selama 12-16 jam.